

Handicare 1000 / 1100

 **handicare**
Making everyday life easier



第 4 页

我们很高兴留在家里

“多亏了座椅电梯，我们可以一直在温馨的家中独立生活”

第 17 页

先进的技术

“座椅电梯可以即时呈现在我们的家中！”

目录

Handicare：经验逾 135 载	6
Handicare 的直线型座椅电梯	8
座椅电梯的优点	12
量身定制的解决方案	17
安装 – 简单快捷	24
常见问题	26
Handicare 品质无忧	27





“多亏了座椅电梯，
我们不需要搬家，
在家中倍感安全和
舒适。”



4

“我们可以留在自己的家里”



23

“Handicare 的顾问来自当地”



24

安装 – 简单快捷

“我们可以留在自己的家里！”

我们的卧室在一楼，最近几年，我发现爬楼梯越发困难。在与丈夫交谈后，我们决定立即采取行动。多亏了一位朋友，我们才开始考虑使用座椅电梯。我们家的楼梯较为陡峭，我不确定是否有合适的解决方案。



“多亏了座椅电梯，我能够四处活动，并安全地继续日常活动。”



我们开始搜索，在联系了 Handicare 认证的当地合作伙伴后，一切都进展得非常迅速。一位顾问前来评估楼梯和我们的情况，以便能够向我们建议和展示可以选择的各种方案。


几天后，我自豪地拥有了一部座椅电梯，它安装得很专业，可以随时使用。从那天起，我们在应对陡峭的楼梯时没有任何问题。

现在，我可以轻松上楼去拿毛衣或老花镜了。

我们特别高兴，之前曾担心不得不将卧室和浴室搬到一楼。或者，我们甚至可能不得不搬家。我们真的很喜欢我们的房子和漂亮的花园，我们很欣慰，找到了更好的解决方案！

Handicare：拥有逾 135 载电梯经验

成立之初，公司是荷兰首家
电梯供应商

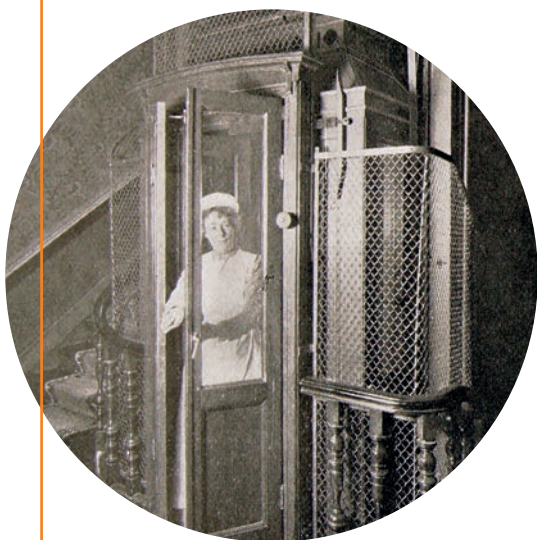

我们第一部座椅电梯
安装完毕



1886

1900

1961

1967



短短 4 年，我们
安装了 600 多部电梯

我们安装了前所未有的第一
部曲线型座椅电梯





目前，我们在全球已经拥有超过 800,000 名满意的客户！

2018

现在



通过开发 Handicare 1100 座椅电梯，我们不断推动创新

Handicare : 电梯创新

公司的起源可以追溯至 1886 年，彼时，我们的创始人成立了一家“技术贸易公司”。在过去的 135 年中，世事变迁，但创新始终存在于我们的 DNA 中。我们一直走在行业的前列，确保电梯产品更加安全、更人性化，并提供全方位的更好选择。从 1961 年安装第一部座椅电梯到现在，我们不断开拓进取，尽可能以最好的方式为客户服务。

除安全性和用户舒适度的改进外，座椅电梯的设计也经历了重大发展。现在，我们有多种款式、装潢和扶手颜色供您选择——座椅电梯适合任何品味和装饰风格！

我们认识到，每个人对座椅电梯的需求都不尽相同，需要满足其个性化需求。首当其冲的是，每个住宅都别具一格。因此，座椅电梯需要专为您量身定制。借助创新型的 PhotoSurvey 工具，Handicare 顾问可以高效、精确地测量您家中的楼梯，同时生成与您家中一模一样的 3D 楼梯图像。之后，您可以与顾问合作，配置完美解决方案，并交付生产。

Handicare 的办事处遍及全球，包括英国、荷兰、德国、法国、意大利、挪威、丹麦、中国、美国和加拿大，品牌以质量、创新和服务闻名遐迩。

Handicare 的直线型座椅电梯

Handicare 对所有情况和楼梯都有解决方案。

所有座椅电梯都安静、安全，且易于使用。无论楼梯是何种样式，皆可随处安装我们紧凑型的定制座椅电梯。即使在最狭窄的楼梯上，安装座椅电梯后，也有足够的步行空间。

座椅电梯在各方面均具有高品质，是为您带来独立生活的宝贵财富。您可以继续生活在自己的家中，免除与楼梯相关的风险。座椅电梯提供行动自由，令您安心无虑。许多满意的客户每天都在体验这样的生活。



舒适

所有座椅电梯均配有舒适的座椅、扶手和安全带。



使用方便

座椅电梯符合人体工学原理，且使用起来十分直观，操纵杆确保平滑操作。



定制化


每个楼梯轨道都是专门设计和制造的，与楼梯高度契合，确保紧密配合，并最大限度地为其他楼梯用户提供空间。





紧凑且可折叠

在不使用时，座椅电梯可以折叠起来，充分节约走廊或门厅的空间。

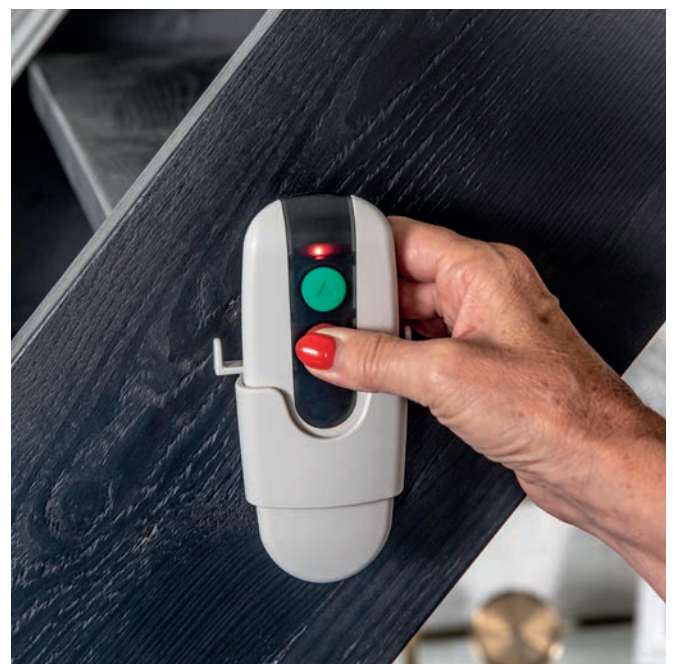

遥控

楼上和楼下均配有两个遥控器，只需按下按钮，即可呼叫座椅电梯。

Handicare 的直线型座椅电梯



动回转

在楼梯平台方向，握住符合人体工学设计的拨动开关，座椅即可转向楼梯平台。这样，上下座椅电梯更加安全和轻松。



安全第一

可以选择自动踏板，无需弯腰，即可折叠和展开踏板。保证安全和舒适。

座椅电梯优势

Handicare 直线型座椅电梯具有许多功能，将为您的家中锦上添花。

折叠铰链

轻松无比！只需折叠轨道，即可保持门口的通畅。在座椅电梯移动到停靠位置时，轻便的铰链折叠式轨道可以毫不费力地折叠起来，保持走廊畅通无阻。



滑轨

Handicare 1100 提供独特的解决方案。滑轨非常适合需要通过楼梯顶部和/或底部的门口进入的走廊。在座椅电梯沿着轨道上下移动时，轨道自动滑动，可以避开任何障碍物。





安全传感器

座椅电梯配有多个安全传感器，在遇到障碍物时，可以自动停下来。

回转座椅

座椅可以向楼梯平台回转，确保更轻松、更安全地离开座椅电梯。这可以手动或自动完成。



零入侵

这种独特的解决方案专为楼梯顶部有门的家庭而设计。其消除了轨道超限问题，无需对房屋进行改造即可安装 Handicare 1100 座椅电梯。



Handicare 1100

1100 是 Handicare 直线型座椅电梯系列的最新成员。该款座椅电梯异常有趣，其轨道十分纤薄和光滑。

Handicare 1100 采用超薄的紧凑型结构，可以靠近墙壁，在楼梯间留下很大的自由空间，供其他楼梯用户安全地上下楼梯。


标准配置包括座椅回转功能，确保您可以安全地进出座椅电梯。



创新型轨道

1100 拥有市场上最纤薄的直线型座椅电梯轨道，确保非侵入式布置。得益于四个驱动滚轮和摩擦轨道系统，而非传统齿条，Handicare 1100 十分安静、光滑，且易于维护。

最后，标准的连续充电功能可确保电池始终充满电，无论座椅电梯停靠在何处。

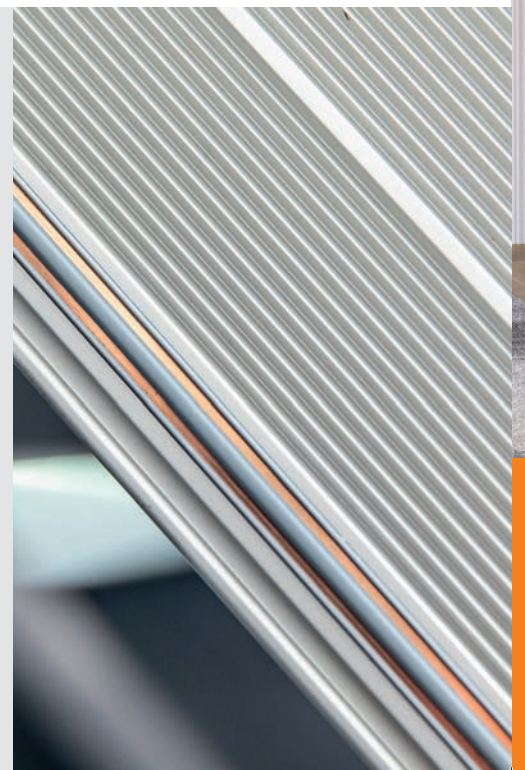

Handicare 1000

Handicare 1000 采用阳极氧化铝轨道，提供时尚而不突兀的解决方案，并带有隐藏式齿条。该型号有六种颜色的内饰可供选择，并可配备自动回转功能和自动折叠式踏板。

铝制轨道外形纤细，有两个停靠点，可以在楼梯顶部和底部为电池充电。轨道可以安装折叠铰链，确保不会阻碍楼梯底部。



多款座椅电梯可供选择

Handicare 1000 供户 外使用



Handicare 1000 户外直线型座椅电梯能够适应大多数天气条件。如果您需要通过楼梯才能进入前门或花园，这是完美的解决方案。您可以再次独立享受户外的自由！



靠且易于使用

- 超薄铝制轨道，采用隐藏式齿条
- 可以 程停靠和呼梯，带有两个停靠/充电点
- 用于保护座椅和电源组的防水罩（IP44 等级）
- 石青色内饰和橡胶踏板，可提高耐用性和安全性
- 涂漆塑料部件，改善紫外线防护
- 电镀紧固件，可提高耐腐蚀性
- 可提供高达 160kg 的重型版本
- 控制器操作简便

专门为您 定制的座 椅电梯

们使用 PhotoSurvey 精确测量您的楼梯。通过这些测量，可以展示座椅电梯在楼梯间的 3D 图像。您可以与顾问一起配置座椅电梯，确保您在他离开之前对设计感到满意。

一旦您对建议的解决方案感到满意，便可以在 Handicare 自有的制造工厂开始生产您的座椅电梯。Handicare 很自豪为客户设计、开发和制造座椅电梯解决方案。



座椅电梯适合每种装修风格

当然，座椅电梯与家居装饰的其余部分完美搭配至关重要。因此，提供四种座椅款式，供您选择，其具有不同的装饰风格。

座椅款式

(HANDICARE 1100)



香草米色





智能 XXL 座椅

(HANDICARE 1000)

Handicare 1000 XL 和 XXL 的载重量分别为 160 kg/ 25 英石和 200 kg/31½ 英石，是力量最强大的型号。



智能座椅

(HANDICARE 1000)



智能高脚座椅

(HANDICARE 1000)

如果楼梯狭窄或膝盖或髋关节有问题而无法坐下，智能高脚座椅堪称理想之选。座椅位置升高，且降低座椅深度，可以在由安全带固定的情况下，以站立姿势使用电梯。



户外座椅

(HANDICARE 1000)




红宝



可可色




沙黄

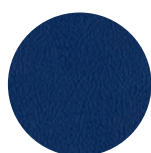

宝蓝色



石青色

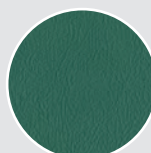

绿玉色

座椅颜色

(HANDICARE 1000)

如何使用座椅电梯

第 1 步

折叠扶手、座椅和踏板，然后，坐在座椅电梯上。可以选择电动踏板，继而自动展开踏板。



第 2 步

记得系好安全带。



第 3 步

在感到舒适和安全时，使用拨动开关，操作座椅电梯。



第 4 步

在上楼后，可以使用旋转手柄或自动旋转功能，将座椅转向顶部平台，即可轻松离开座椅电梯。



第 5 步

最后一步，只需解开安全带，并步入楼梯平台。



“这么好用，我现在
可以舒舒服服地上
楼了！”





“我们选择了经过认证的 Handicare 区域合作伙伴”

一段时间以来，我的妻子爬楼梯一直有困难。她起初不愿意承认，但经过几次事件后，我们进行了讨论，并做出决定；需要在这个问题变得太危险之前加以解决。

我们开始在互联网上搜索，并对市场上的不同解决方案和产品进行比较。凭借 135 年的经验和广泛的产品组合，Handicare

让人眼前一亮，最终，我们选择了附近的经过认证的 Handicare 合作伙伴。

一位经验丰富的顾问拜访了我们的家，评估我们的情况和楼梯。这样，他可以向我们建议可用的最佳解决方案。就在一天后，座椅电梯已经准备好安装在我们家了。

“令人欣慰的是，如果需要，我们可以依靠当地认证的 Handicare 合作伙伴提供支持或服务。对于不住在附近的孩子来说，这也解决了他们的后顾之忧。”





安装

在您选择 Handicare 后，我们将可靠地管理从设计和开发到生产座椅电梯的整个过程，令您安心无忧。我们将为您制造出品质上乘的定制座椅电梯，并送到您的家门口，由通过 Handicare 认证的工程师进行安装。



1

预约适合您记事簿的时间。技艺精湛的工程师在短短几个小时内即可安装完毕。

2

首先安装座椅电梯的轨道，轨道将贴附到楼梯，而非墙壁上。在轨道安装完成之后，工程师将安装动力装置，然后安装座椅，这表示座椅电梯几乎可以使用了。



3

座椅电梯安装好后，工程师会花时间，解释如何使用座椅电梯。只有当您 100% 感到舒适和满意时，他才会开始下一步。

常见问题

我们力求 100% 的客户满意度。因此，我们加倍努力，为您提供最高标准的服务，并尽可能以最佳方式回答您的问题。

我们列出了客户最常见的一些问题。如果您有其他问题，请与当地的 Handicare 代表或认证顾问联系，将为您提供免费的咨询服务，您不必有任何负担。

座椅电梯可以安装在楼梯间吗？

Handicare 为直线型楼梯和曲线型楼梯提供多种座椅电梯款式。无论楼梯狭窄、陡峭、弯曲还是较长，我们都可以通过各种电梯型号为每种环境提供合适的解决方案。Handicare 始终为您的楼梯间提供合适的解决方案。

座椅电梯与我家中的装饰风格搭配吗？

我们将尽最大努力，在座椅电梯和房屋装饰风格之间实现完美搭配。Handicare 提供多种座椅和装饰颜色，供您选择，可与大多数室内装潢的颜色相协调。

在安装座椅电梯时，需要对我家进行大改造吗？

不需要！Handicare 座椅电梯在短短几小时内即可安装完毕。因为固定在楼梯间，所以，您不必担心会在墙壁钻孔或需要改造。

座椅电梯的价格是多少？

由于每部座椅电梯都是定制的，因此，价格因座椅电梯的配置不同而异。但是，我们提供多种解决方案，满足您的预算要求。

在停电期间，座椅电梯会怎样？

无需担心停电问题。Handicare 座椅电梯将使用电池来保持运行，且仍可用于上下楼梯至少 10 次。

保证质量



所有的新产品都提供全面的保修。Handicare 座椅电梯是高品质的代名词：安全、创新、舒适和设计方面的品质无忧。我们保证，所有产品都符合安全和质量方面的最高标准。

Handicare 很荣幸拥有 ISO 9001:2015 质量证书，此外，所有产品都经过 TNO 和 Liftinstituut 等全球独立检测机构的测试和批准。

EN81-40

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Handicare 的合作伙伴网络遍及全球

Handicare 与值得信赖的全球合作伙伴网络合作，为成千上万的座椅电梯用户提供本地化专业知识。只需几个问题，即可确定适合您的座椅电梯类型，然后推荐满足您现在和未来需求的最佳解决方案。

为了能够针对最适合您的楼梯的座椅电梯解决方案给出确切成本，他们需要到您的家中拜访，进行全面的勘测和用户评估。在勘测期间，顾问将花时间讨论您的个人情况，并推荐座椅电梯解决方案。这是完全免费的，且您不必有任何负担，无需当时作出决定。

如需获得 Handicare 合作伙伴提供的免费且无需承担义务的房屋勘测和评估，或获取有关其他产品或服务的信息，请与我们联系。

www.savaria.cn

生产地址：广东省惠州市仲恺高新区沥林镇泮沥村
福建省厦门市海沧区东孚大道2881号厂房14楼

办事处：福建省厦门市湖里区港中路1260号317室

电话：+86 592 6038 779

邮箱：contactasia@savaria.com



关注萨瓦瑞亚
获取更多产品详情