



Handicare 1000

强劲款直线座椅电梯

瀚德凯尔1000型号直线座椅电梯为行动困难的群体提供了一种时尚且省空间的上下楼移动解决方案，并为用户配有多种自动功能选项。


Handicare 1000 | 强劲款直线座椅电梯

瀚德凯尔1000直线座椅电梯采用隐藏式齿条轨道设计，铝制导轨结构纤细紧凑，可完美融入各类家居环境。在楼梯顶部及底部均设有充电站点以确保电梯随时保持充足电力。



颜色选择

座椅颜色

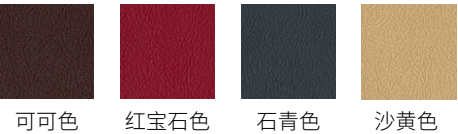

产品特点



节能环保
电梯运行成本低，电池可在停电时保持电梯正常工作。



高载重量
加大版型号最大承重为200公斤。



多重安全保障
卡扣式安全带--安全带系好前，座椅电梯无法启动。更多安全功能，包括紧急停止按钮、安全传感器及一键警报呼叫装置。



更多选配功能
多种升级功能可选，满足您当下及未来的需求。选配包括电动座椅旋转、电动折叠脚踏板与不同尺寸的安全带。



户外专用

瀚德凯尔1000直线座椅电梯适用于户外场景，材料采用防紫外线饰面，有效提升耐候性能。其配备的镀铬防锈轨道和IP44防护等级防水罩，能确保电梯在户外条件下长期稳定地运行。内置钥匙开关系统可防止非授权操作，保障使用安全。



高脚座椅

高脚座椅专为膝关节活动受限用户和极窄楼梯而设计。该款式采用了抬高的座椅和更紧凑的座深设计，支持使用者在站立姿态下安全乘坐，同时通过系好的安全带确保安全。



铰链式轨道

轻便的折叠铰链导轨，在电梯停靠时可快速收折以保持通道畅通。其电动折叠轨道功能，有效避免底部空间堵塞问题。标配的可调节座椅高度功能，能根据使用者需求进行个性化设置。



怎么操作？

扫码了解如何使用1000型号座椅电梯。



一键警报

只需按下按钮，您可通过最新推出的萨瓦瑞亚一键警报呼叫功能，立即外呼您预设的紧急联系人。该装置采用双向语音通讯技术，响应迅速，为使用者提供必要的安全保障。



Handicare 1000 | 强劲款直线座椅电梯

尺寸与规格

所示座椅样式示意图仅供示例参考。


	智能款	高脚款
A 靠背内侧到墙的距离	75mm*	75mm
B 座椅深度 延长款座椅深度	360mm 425mm	247mm -
C 折叠时脚踏板到墙最小距离	385mm*	385mm
D 展开时脚踏板到墙最小距离	650mm*	650mm
E 扶手间距 - 外侧 加宽 (XL) 加宽 (XXL)	550mm 590mm 635mm	550mm - -
F 扶手间距 - 内侧 加宽 (XL) 加宽 (XXL)	465mm 520mm 565mm	465mm - -
G 靠背高度	455mm	455mm
H 脚踏板到座位高度	465-540mm	675-875mm**
I 脚踏板最小高度	70mm	70mm
	-	597mm
	-	745mm
轨道到楼梯扶手的最小距离	115mm	115mm
标准版载重	137kg	137kg
标准版最大限重	160kg	160kg
加大版载重 (XXL)	200kg***	-
重型版载重 (XL)	160kg***	-
运行速度	0.07m/sec	0.07m/sec
电源	2节12伏电池	2x12V batteries
楼梯倾斜度	21-56°	21-56°

本产品尺寸可能因实际安装环境差异而有所调整。手册所示图片及技术参数仅作参考，瀚德凯尔 (Handicare) 保留在不另行通知的情况下对产品设计及规格进行修改的权利。所有技术信息均基于诚信原则提供，但不构成任何形式的保证或承诺。



关注萨瓦瑞亚
获取更多产品详情

瀚德凯尔 (Handicare) 作为拥有超过百年行业经验的座椅电梯专业制造商，始终致力于产品创新与服务优化。公司产品线涵盖室内外直线及曲线座椅电梯解决方案，业务范围遍及全球50多个国家和地区。

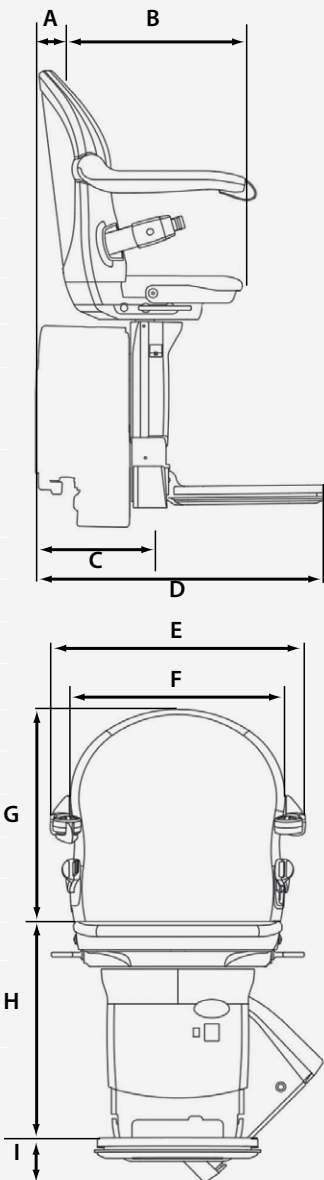

* 对配双向电动旋转功能且拓宽扶手间距的加大版型号 (XXL) 在靠背内侧到墙的距离和脚踏板到墙最小距离上均需额外增加45mm宽度。

** 高脚款座椅的脚踏板到座位高度不适用于加大版型号 (XXL)。

*** 加大版和重型版不适配电动折叠轨道。



福建省厦门市湖里区高崎北路420号701室办事处
+86 5926038779
contactasia@savaria.com
www.savaria.asia

瀚德凯尔 (Handicare) 作为萨瓦瑞亚集团旗下子公司，秉承“助力终身出行自由”的企业愿景”，集团拥有2400多名员工，致力于为全球家庭及公共建筑提供先进的无障碍通行解决方案。